
### 臼歯部だけでなく、歯間部・歯頸部でのプラーク除去率 UP!



プラーク除去率比較試験 31名を対象に24時間のブラーク蓄積を行った後、[バトラーハブラシ #025NEOM] と従来品をそれぞれ3分間使用させ、 ブラッシング前後のブラーク評価を行いました。ブラーク評価方法は、Ramfjordの代表 6歯を対象にブラーク染色を行い、 1歯を頬舌側それぞれ6部位に分け、Plaque Control Recordの変法を用いて評価しました。(t 検定)



#025NEO(M)(ふつう)

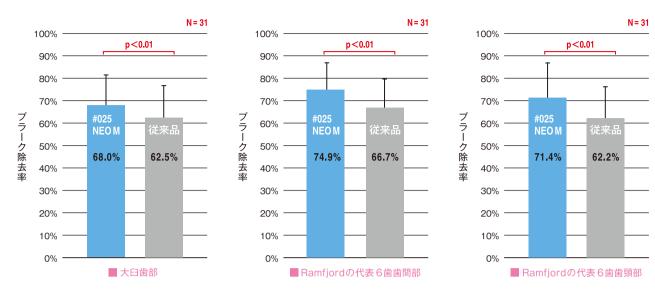

#025NEO(S)(やわらかめ)

### ■ 人気のニュアンスカラー 4色をラインアップしました



®登録商標 BUTLER 

columbta de la columbta del columbta de la columbta de la columbta del columbta de la columbt

商品写真

原寸大



商品名	植毛列•穴数	毛の長さ	毛の太さ	毛のかたさ	販売単位	患者様希望価格
バトラーハブラシ#025NEO(M)	(0000000 3列 (000000000000000000000000000000000000	9mm	0.19mm	ふつう	1ダース (12本入)	1本 300円 (稅抜価格)
バトラーハブラシ #025NEO(S)	(000000- 3列 20タフト	9mm	0.15mm	やわらかめ		

製品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

## サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3番1号 TEL:072-682-4733 FAX:072-684-5669 http://www.sunstar-dental-information.jp

#025 NEO

**2.5**mm

BUTLER #025 NEO (M) (ふつう) /#025 NEO (S) (やわらかめ)

※1 ネックおよびハンドル形状に歯科衛生士の声を反映 ※2 歯科医院で販売するハブラシ内で最薄(2019年6月サンスター調べ)

医療機関向

**SUNSTAR** こだわりの深化 臼歯部の みがきやすさ、 さらに実感! 共同開発

操作性を 歯の 清掃性を 向上 向上

新発売

# 超極薄ヘッドとスリムロングネックで口腔内の隅々まで毛先が届く!

業界最薄 2.5mmの 超極薄ヘッド。 狭い口腔内で自由自在。

> プラークコントロールの 難しい最後臼歯部遠心面も しっかりみがけます。

NEW!

従来よりも長く、 握りやすい六角形の フレックスハンドル。

ハンドル全体が伸び、 グリップのくびれにより ペングリップでも、パームグリップでも 楽に磨けます。

材質にすべりにくいラバー (エラストマー)を採用。



六角形のハンドル ペングリップ





パームグリップ 小指までグリップ可能に!



抗菌コート毛採用。

使用後の細菌の繁殖を防ぎ、 清潔に保ちます。

さらに従来品と比較し、 フィラメントの 耐久性も向上。


NFW!



ネック部をスリム化し、 大臼歯部まで スムーズに到達。 従来同様84mmの スリムロングネック。

#025NEO 従来品



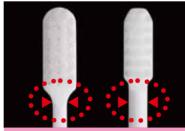

※1 歯科医院で販売するハブラシ内で最薄 (2019年6月サンスター調べ) ※2 抗菌部位:毛 抗菌剤:クロルヘキシジン

### 超極薄ヘッド 「ヘッドの薄さを実感!]

超薄型ヘッドなので一般的な厚みのハブラシと比べて口腔内でハブラシを動かしやすく 狙った部位のプラークを効率よく除去できます

#### 下顎臼歯部頬側面





#025NEO



一般的なハブラシ

スリムロングネック「臼歯部までスムーズに到達!]

最後臼歯部まで届きやすいため、嘔吐反応の強い方、開口量が少ない方でも 楽にしっかりみがけます。



最後臼歯部遠心面



最後臼歯部舌側面



最後臼歯部類側面

あらゆる年代や口腔状態に幅広くご使用いただけます!

学童期のお子様から矯正、歯並びに問題のある成人のう蝕や歯周病対策に適しています!



〈小児〉小窩裂溝




〈成人〉矯正



〈成人〉歯列不正

# 歯科衛生士からもいち押しの声

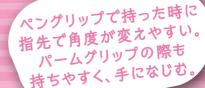

ネックが長く ヘッドが薄いため、 臼歯部まで みがきやすい。

コンパクトな操作性は 維持したまま、 ハンドルも従来品より 手にフィット。

